

わずか15分で確認可能!



唾液検体用

SARS-CoV-2 抗原検査キット

■製品概要



- ①パッケージ
- ②検査キット本体
- ③スポイト
- ④唾液採取容器
- ⑤検体希釈液
- ⑥滴下チューブ

商品名	品番	適用サンプル	保管	使用期限
SARS-CoV-2 抗原検査キット	JOYSBIO-covid-19-AGTK	唾液	2~30℃	製造日より 24か月

●本製品の使用は、研究用に限定して販売しております。●本製品の使用により発生した損害及び損失について、弊社では一切の責任を負いません。

■検査手順


1. 検査準備

パッケージを開封し、中身を全て取り出します。検体希釈液の入った容器の先端部分をねじって取り外し、中にある検体希釈液を全てチューブの中に移します。
 ※検体希釈液は必ず全量使用してください。
 検体希釈液の量が少な過ぎる場合は、不正確なテスト結果が出る可能性があります。



4. 抗原検査キット本体へ検体注入

抗原検査キット本体を袋から取り出しておき、清潔で平らな場所に設置します。検体の入ったチューブを絞り、検体注入口に3滴程度注入します。
 ※検査開始後30秒が経過しても、液体に動きがない場合、さらに希釈した検体を足して下さい。

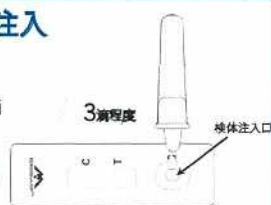

2. 唾液の採取（検体採取）

唾液を集める前に、頬をリラックスさせ、指で15~30秒間優しくマッサージします。舌を上顎、下顎、根元に押し当てて、唾液を充分に出すようにします。唾液を採取容器に 静かに吐き出します。
 ※検体採取は、起床時に採取することを推奨します。
 ※検体採取前1時間以内は飲食をしないでください。
 ※検体は採取後1時間以内に処理する必要があります。



5. 検査結果判定

検体注入後、15分から20分の間に結果を確認します。
 ※検体滴下後、20分程度の結果で判定して下さい。




3. 検体希釈液と検体を合わせる

スポイトを垂直に持ち、唾液採取容器から唾液を抜き取り、3滴程度の唾液を抽出してチューブに移します。チューブの底を回転または揺さぶるなどして唾液と検体希釈液を混ぜ合わせます。



6. 検査完了

反応ありの場合：コントロールライン(C)とテストライン(T)の両方に線が現れます。
 反応なしの場合：コントロールライン(C)のみに線が現れます。
 無効の場合：テストライン(T)のみに線が現れます。または、線が現れません。
 ※『C』にラインが現れない場合は、新しい検査キットで再度検査して下さい。

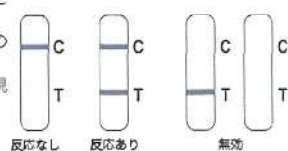

COVID-19抗原検査キット 申込書

名鉄観光 横浜支店
 横浜市中区尾上町4-52
 横浜野村證券ビル5階
 電話 045-641-4166/FAX 045-641-4169
 担当：松尾 亮

◆申込日 年 月 日

◆商品 JOYSBIO COVID-19抗原検査キット（研究用試薬）

1キット価格 3,200円（税込3,520円） ※販売は12キット(1箱)単位

*送料：12キットは送料がかかります。

*唾液検体用のものを大量発注される場合は、事前にご相談ください。 (円)

注文内容		単価(税込)	数量	金額
●鼻腔ぬぐい液検体用 120キット（送料無料）		422,400		0
●鼻腔ぬぐい液検体用 12キット		42,240		0
●唾液検体用 12キット		42,240		0
送料	関東・甲信越・北陸・中部・近畿・中国	715		0
	東北・四国・九州	1,100		0
	北海道	1,650		0
	沖縄	3,850		0
合計				0

◆申込者

*以下に住所をご記入ください

住所	〒
電話番号	
宛名	団体名： お名前：

◆お届け先

名鉄観光支店

お客様直送

*申込者住所と異なる場合は、以下にご記入ください

住所	〒
電話番号	
宛名	団体名： お名前：

◆備考

--

- ・製品概要につきましては別紙を必ずご確認ください。
- ・商品の納品について、詳しくは担当者へご確認ください。
- ・ご記入いただいた個人情報は、本業務の目的にのみ使用します。